Q-Optics



TTL OCCHIALI INGRANDENTI - ISTRUZIONI

Q-Optics

Grazie per aver scelto i nostri occhiali ingrandenti!

349 1028493 - Area commerciale
346 1403278 - Assistenza tecnica
0522 791927 - Amministrazione(Interno. 3)

qoptics@occhialiingrandenti.it

qoptics_italia

INCLUSO NEL TUO KIT



COSA TROVERAI:

- I tuoi ingrandenti TTL personalizzati
- Laccetto ferma-occhiali
- Naselli di ricambio
- Spray per la pulizia
- Pannetto in microfibra
- Protezioni laterali (montature Classic e Panto)

Accessori e ricambi disponibili su
qopticsitalia.it

ACCESSORI LUCE

Se hai acquistato anche una luce led, troverai ulteriori accessori nella custodia. Per altre informazioni visita la pagina del sito dedicata.

ACCESSORI REMOVIBILI

LUCI A LED



Allinea il canale di montaggio della luce al logo Q-Optics sulla montatura.



Fai scorrere la luce sul logo Q-Optics fino a quando non sarà saldamente fissato.

Rimuovi la luce prima di lavare i tuoi ingrandenti!

INSERTO GRADUATO (OPZIONALE)

L'attacco per l'inserto RX graduato si trova nelle montature Eclipse sopra i naselli e va allineato con il canale di fissaggio sul retro dell'inserto stesso.



Allinea all'attacco della montatura il canale di fissaggio sull'inserto RX e fallo scorrere verso il basso sulle viti.

L'inserto dovrebbe risultare dietro ai naselli.

Fai scorrere verso l'alto per rimuovere l'inserto



Il tuo inserto RX può essere rimosso per una facile pulizia!


PERSONALIZZA LA VESTIBILITÀ




CORRETTO


Gli ingrandenti dovrebbero rimanere nella parte alta del naso

INCORRETTO

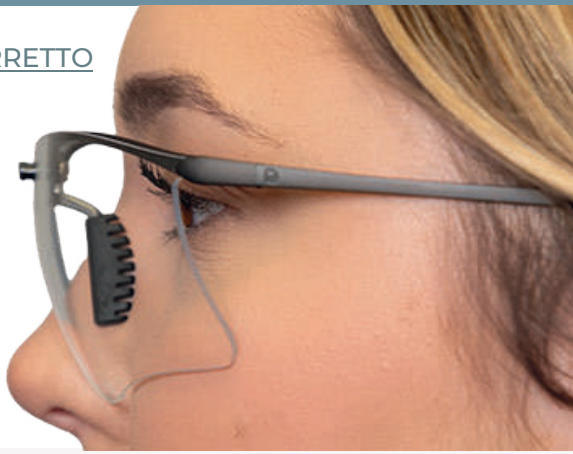

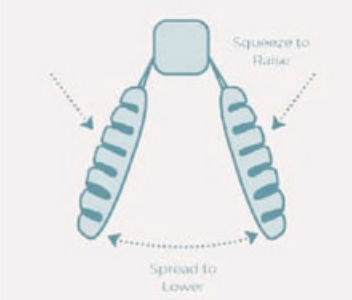

PERSONALIZZAZIONE NASELLI
Per sollevare gli ingrandenti, avvicina i naselli tra loro;Ă per abbassare gli ingrandenti, allarga i naselli.

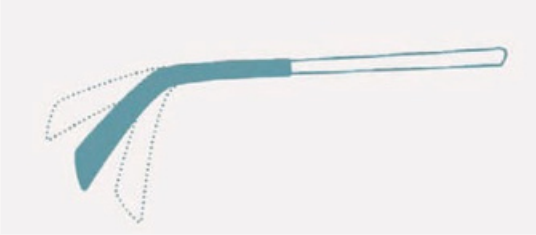

PERSONALIZZAZIONE ASTINE
Piega il terminale delle astine per rendere la vestibilità più sicura e confortevole.

USARE GLI ACCESSORI

Naselli

I naselli a ponte e quelli singoli si montano e rimuovono alla stessa maniera. Rimuovi i naselli facendoli scorrere vero il basso sulle punte di metallo della montatura.
Monta i nuovi naselli facendoli scorrere verso l'alto con il lato smerlato rivolto verso il viso.



Nella confezione sono inclusi dei naselli di ricambio per sostituirli in caso di usura.

Laccetti ferma-occhiali


Un laccetto è incluso per aiutarti a tenere gli ingrandenti a posto mentre li si indossa. Per attaccare il laccetto agli ingrandenti inserisci le estremità in silicone alle astine.



CONSIGLIO: Qualche goccia di spray per la pulizia delle lenti favorisce l'inserimento delle estremità insilicone nelle astine.

Protezioni laterali

Sulle protezioni laterali è indicato su quale lato vanno inserite.

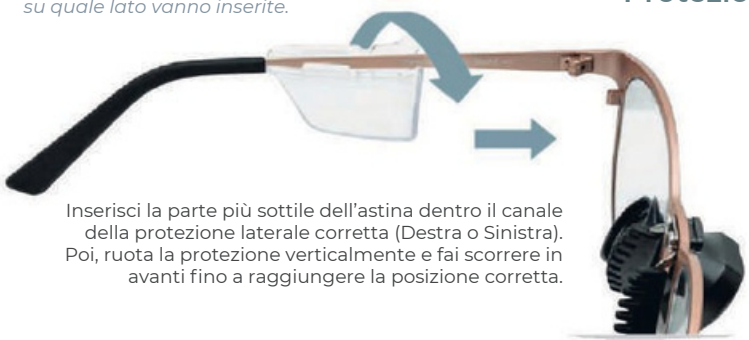

Inserisci la parte più sottile dell'astina dentro il canale della protezione laterale corretta (Destra o Sinistra). Poi, ruota la protezione verticalmente e fai scorrere in avanti fino a raggiungere la posizione corretta.



Una volta fatta scorrere del tutto in avanti la protezione, questa si posizionerà nella parte frontale della montatura. Ripeti lo stesso processo con la protezione del lato opposto.

PULIRE GLI INGRANDENTI



SPOLVERA

Step 1



Rimuovi la luce dagli ingrandenti!

Utilizza la siringa dell'aria del riunito per rimuovere la polvere prima della pulizia.

IGIENIZZA

Step 2



Utilizza il pannetto in microfibra e lo spray inclusi nel kit Q-Optics e asciuga completamente gli ingrandenti.

DISINFETTA

Step 3



Disinfetta gli ingrandenti con le salviette CaviWipes.

- ! Non immergere mai gli ingrandenti o la luce nell'acqua.
- ! Non inserire mai gli ingrandenti o la luce nelle vasche a ultrasuoni o in autoclave.
- ! Per pulire utilizza un panno in microfibra pulito, non carta o scottex.
- ! Evita il contatto diretto del rilevatore di placca con le lenti.
- ! In presenza di sabbia o altri residui, utilizza sempre la siringa dell'aria del riunito per rimuoverli prima di passare il pannetto in microfibra.

CURA E MANUTENZIONE

L'opportuna conservazione degli ingrandenti aiuterà a mantenere nel tempo la performance e la vestibilità ottimale.

Conservare gli ingrandenti nell'apposita custodia e seguire le linee guida elencate in questo manuale preserverà la durata negli anni.

Non sottoporre gli occhiali ingrandenti ad alte temperature.

GARANZIA

Le montature, la collimazione dei monocoli e l'adesione alle lenti portanti di ogni occhiale ingrandente Q-Optics sono garantite a vita.

Le luci, come anche i dispositivi elettronici, sono coperti da una diversa garanzia limitata.

Scopri i dettagli della garanzia nella sezione "Supporto" del sito qopticsitalia.it



Q-Optics Italia
Via J. F.Kennedy, 15Q
42124 Reggio nell'Emilia, RE
www.q-opticsitalia.it